


Kit insufflation

Ensembles de filtres et de tubulures

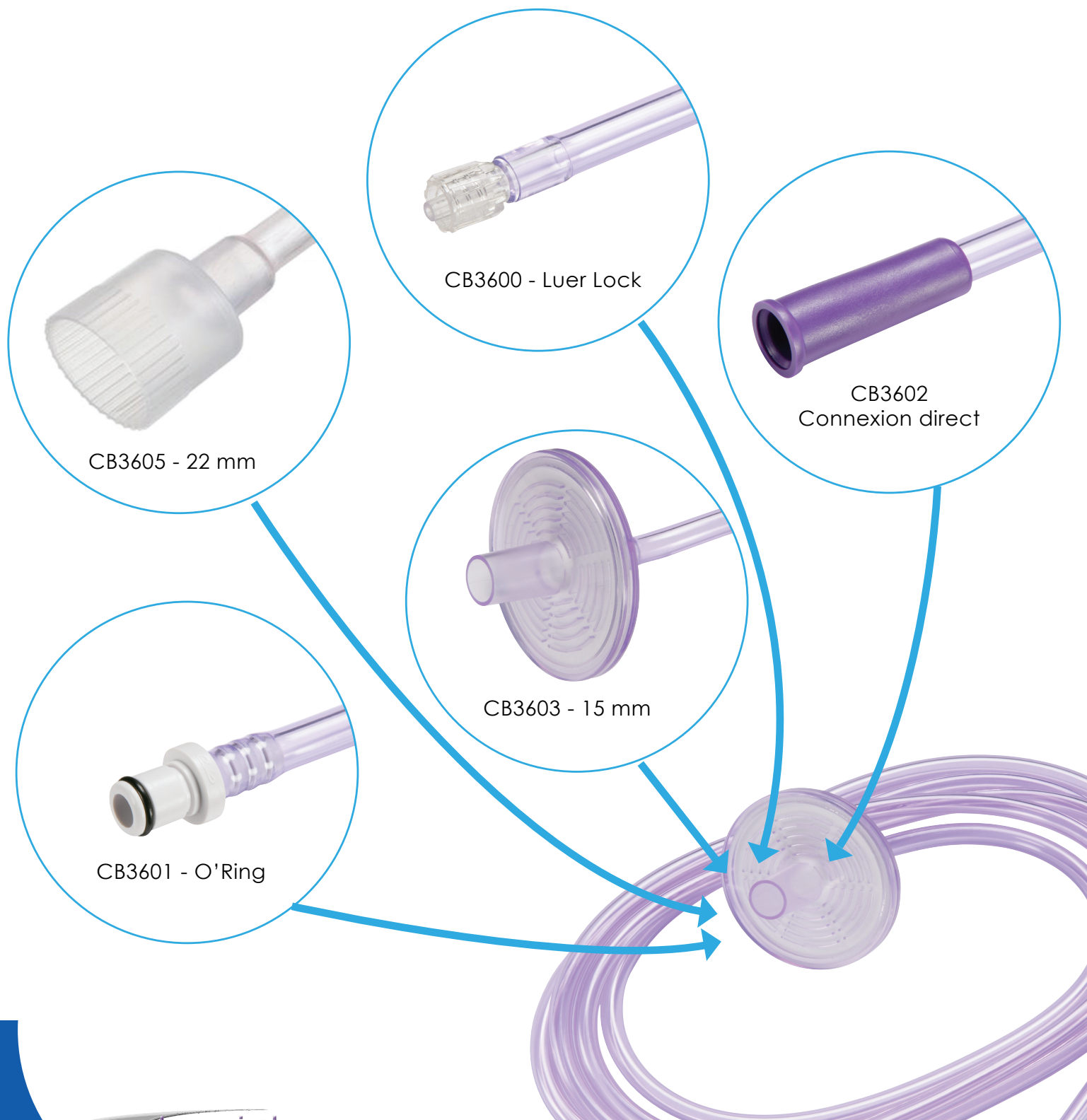

Ensembles de filtres et de tubulures d'insufflation

(CB3600 / CB3601 / CB3602 / CB3603 / CB3605
PS3600 / PS3601 / PS3602 / PS3603 / PS3605)

FR

MODE D'EMPLOI

Lire les informations suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Indications :

Les ensembles de filtres et de tubulures d'insufflation Purple Surgical / Cory Bros permettent le passage de dioxyde de carbone de l'insufflateur vers le patient, assurant une insufflation intra-abdominale et prévenant toute contamination croisée.

Contre-indications :

Ce dispositif ne doit pas être utilisé lorsque les techniques très peu invasives sont contre-indiquées.

Description du dispositif :

L'ensemble à tube et filtre d'insufflation chirurgicale Cory Bros / Purple comprend un embout de Luer lock pour raccordement sur une aiguille Veress ou une canule Trocar.

Il existe aussi un filtre, d'un rendement de filtration de 99,9999 %, qui évite la contamination croisée des pathogènes transportés par le gaz entre le patient et l'insufflateur. Ce dispositif est fixé à l'insufflateur, soit par un autre embout Luer lock, fixé à une petite section de tube (CB3600 / PS3600) soit par un adaptateur à joint torique (CB3601 / PS3601), un adaptateur à ajustage correct (CB3602 / PS3602), ou un raccord 15 mm faisant partie du filtre (CB3603 / PS3603) ou encore un raccord 22 mm (CB3605 / PS3605). Si l'insufflateur a un robinet de gaz à ajustage correct de petit diamètre, l'embout Luer lock peut être sectionné et le tube appliqué directement à ce raccord.

Mode d'emploi :

- En utilisant une technique stérile, retirez le dispositif de son emballage. Pour éviter d'endommager les instruments présents sur la table stérile, ne faites pas tomber le dispositif sur le champ stérile.
- Faites sortir l'extrémité de la tubulure contenant le filtre hors du champ stérile pour le raccorder à l'insufflateur. Le dispositif PS3603 / CB3603 utilise un raccord push fit de 22 mm situé sur le logement du filtre. Le dispositif PS3600 / CB3600 utilise un raccord luer lok. Si un raccord à poussée de petit diamètre est requis pour l'insufflateur, il suffit de couper l'extrémité de la tubulure équipée du raccord luer lok.
- Raccordez l'extrémité de la tubulure stérile présentant le raccord luer lok au robinet de gaz d'une aiguille de Veress ou à une canule de trocar pour permettre l'insufflation abdominale.

Précautions / Avertissements :

- Cet appareil est destiné à un usage unique et ne doit en aucun cas être réutilisé ou restérilisé. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Les procédures endoscopiques doivent être effectuées uniquement par des médecins disposant d'une formation et d'une connaissance adéquates de ces procédures. Il convient en outre de consulter les publications médicales en ce qui concerne les techniques, les risques, les contre-indications et les complications avant de réaliser ces procédures.
- Le filtre risque d'être obturé si du liquide provenant de la cavité péritonéale pénètre par inadvertance dans le filtre par la ligne d'évacuation.

Mesures de précaution concernant une utilisation unique :

Ce(s) produit(s) est (sont) fabriqué(s) et vendu(s) pour une utilisation unique. Il est interdit de retraiter et de stériliser à nouveau ce produit. Les effets de tout retraitement et de toute nouvelle stérilisation non autorisés peut entraîner les complications suivantes :

1. Contamination croisée en raison d'un retraitement / d'une nouvelle stérilisation inefficace.
2. Fatigue mécanique et défauts associés en raison des effets du processus de retraitement / nouvelle stérilisation.

Après utilisation unique, le produit doit être recyclé immédiatement en tant que déchet médical contrôlé

Fourniture

Les ensembles de filtres et de tubulures d'insufflation Purple Surgical / Cory Bros sont fournis à l'état stérile pour une utilisation sur un seul patient. Mettre au rebut après utilisation.